



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

rOnda
hjelpemidler



multisensorial
standing





Et nytt konsept ståstativ.

App Multisensorial Standing er et vertikalt ståstativ designet av Ormesa for å gjøre terapien morsommere og mer engasjerende, takket være en ekstraordinær multisensorisk opplevelse.

En patentert elektronikk som er montert under plattformen, forvandler **lyd eller video signal til vibrasjoner.**

Vibrasjonene forplanter seg gjennom hele stativet, (inkludert plattform, knestøtter, kroppsstøtter og bord) **slik at barnet, gjennom mulltisensorisk stimuli, får en morsom opplevelse.**

Dens struktur er uten begrensning, og tilpasser seg på en enkel og effektiv måte til de forskjellige stillingsbehovene.

PRODUKT
MERKET 



Musikk, rytmer og vibrasjoner: koble til enheten din!

App Multisensorial Standing kan koble til et hvilket som helst pedagogisk eller interaktivt verktøy, for eksempel et nettbrett, datamaskin, konsoll, pedagogisk programvare og så videre.

Lyder forvandlet til vibrasjoner forsterker de rehabiliterende aktiviteter, noe som gjør dem dynamiske, interaktive og engasjerende. **Den statiske stående stilling blir en dynamisk opplevelse.**



Stimulering for læring

For barn som har vanskeligheter med å koordinere sanseinntrykk og motoriske handlinger, er **App Multisensorial Standing et eksepsjonelt verktøy for stimulering og læring.**

App Multisensorial Standing revolusjonerer stående øyeblikk med musikk, lyder, rytmer og vibrasjoner. Barn med funksjonshemninger **får oppleve nye stimuli og glede.**





Multisensorisk

Sensorisk stimuli hjelper til med å overvinne fysiske og emosjonelle barrierer

App Multisensorial Standing gjør rehabiliteringsøvelsene til holdning, evne **til samhandling, koordinering av hånd og øye og kognitive ferdigheter, langt mer effektive.**

Med APP multisensoriell blir stående terapi **et hyggelig og morsomt øyeblikk** som er i stand til å stimulere barnets oppmerksomhet og motivasjon. De forskjellige aktivitetene som kan tilbys gjennom **App Multisensorial Standing forenkler trening og terapeutiske inngrep, og oppmuntrer barnet til deltakelse.**

Årsak og virkning (f.eks. Trommer) kan brukes til kognitivt og motorisk arbeid, med forskjellige trommer som produserer lyder og vibrasjoner av varierende intensitet. Å se en video av en racerbil, der forskjellige motorhastigheter gir forskjellige vibrasjoner, gjør opplevelsen mer ekte og morsom for barnet.

Oppfatning




Avslag på stående terapi.

Oppdagelse



Oppfatning av vibrasjoner og oppdagelsen av lyd.

Motivasjon

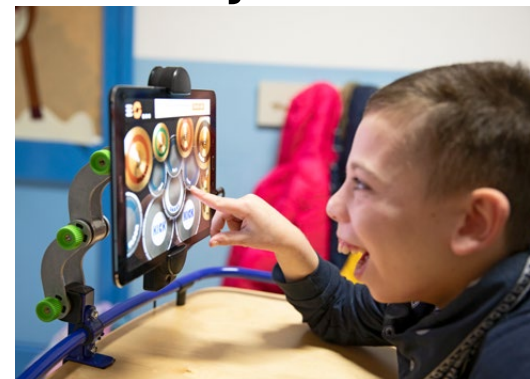

Aksept av rehabiliteringsprosessen.





Tekniske egenskaper og reguleringer



Ramme

ingen kantramme, som hindrer kroppsbevegelse og side-arm bevegelse.
Høydejusterbar ramme med **"sikkerhets-låsesystem"**.

Justering uten verktøy

justeres med spesielle knotter, designet av Ormesa, med effektivt og sikkert grep.
Knottene opprettholder stramming effektivt takket være en intern mekanisme som ikke sliter og ødelegger røret.



Graderte skala

for å hjelpe til med å finne den rette posturale innstillingen valgt av terapeuten.



Patentert elektronisk utstyr


kontrollpanel med justering av volum og vibrasjonsintensitet.


Patentert elektronisk utstyr.



Bekkenstøtte og bryststøtte


uavhengig regulerbar i omkrets, høyde, for og bakover. Hvis brukeren har tilstrekkelig kroppskontroll, kan bryststøtten fjernes.

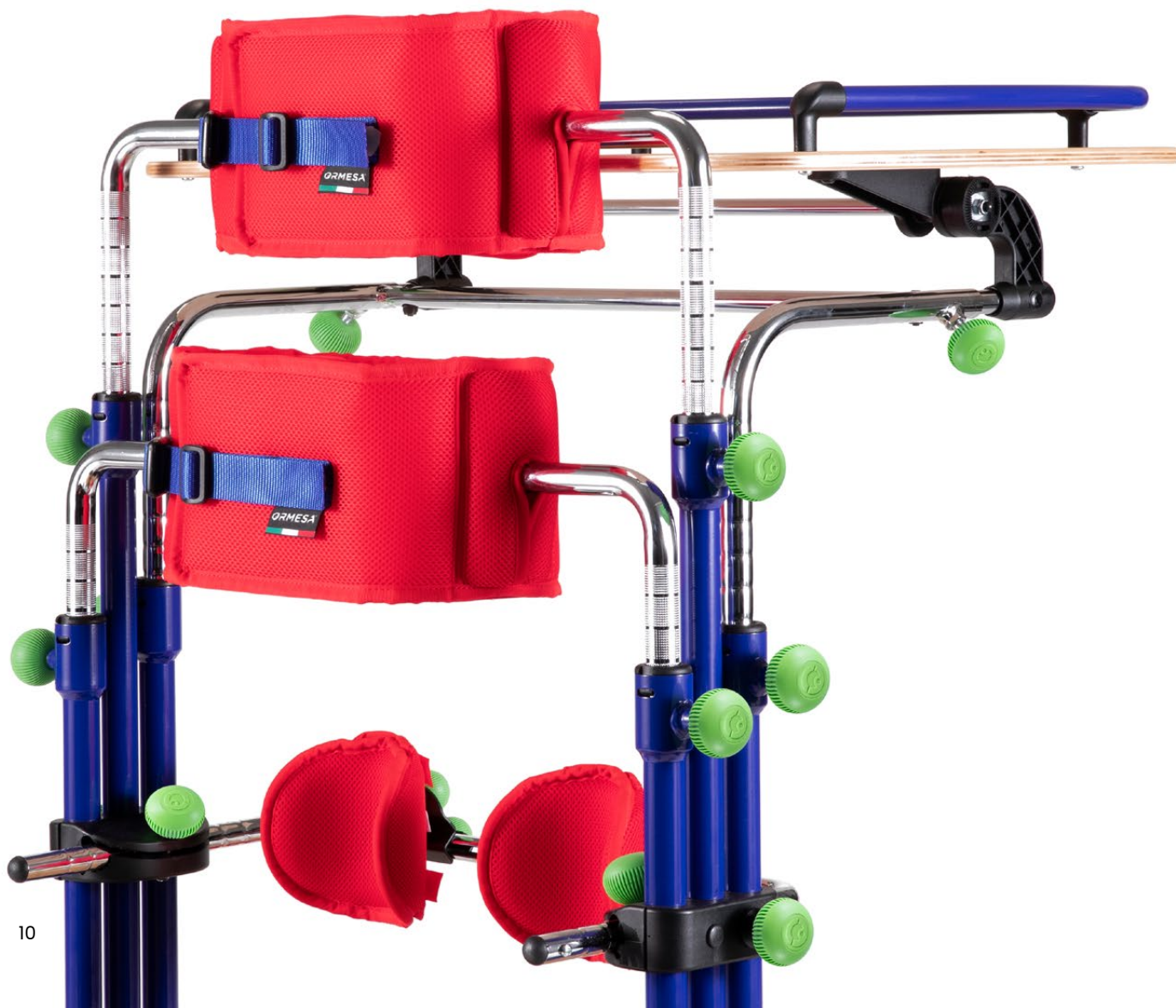

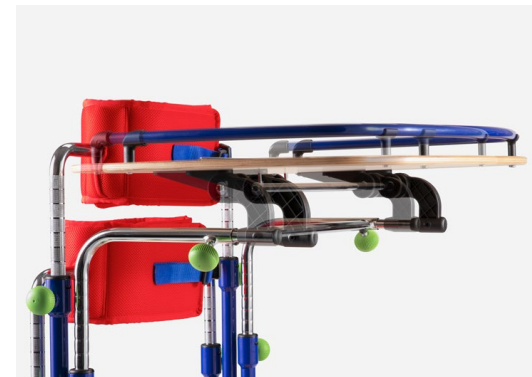

Bjørk kryssfinérbord

designet for pedagogiske formål og for å støtte overekstremiteter, kan fjernes for å lette øvelser i overkroppen. Kan høydereguleres, tiltes samt for-og bakover regulering.

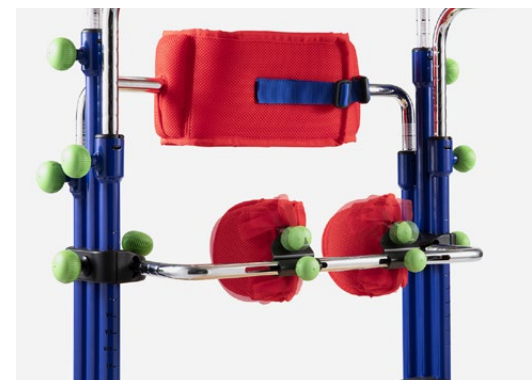

Knestøtter

med avtakbar, vaskbar polstring og med rom for patella utslipp. Uavhengig høyde, forover- og bakover, rotasjon og abduktive reguleringer.



Hæl stopper

bredde- og dybderegulering.



Bjørk kryssfiner

fotstøtte med kontrollpanel og QR-kode som refererer til mulige brukbare applikasjoner.




Svingbare tvillinghjul


Tvillinghjul med 75 mm diameter, med bakre bremses. Hjulene tillater bevegelse fra ett rom til et annet, selv under bruk.



andre komponenter

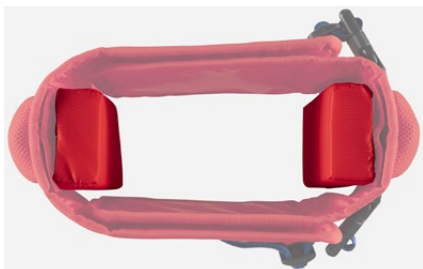

944 Omkretsreduserende
hver 3 cm tykk, kan settes inn i støtter
for tynnere brukere.

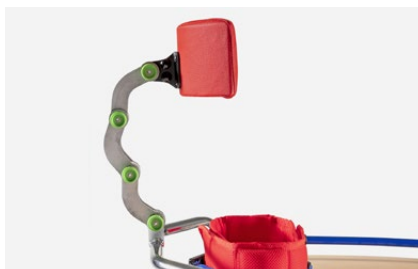

**865 Multiregulerbar
nakkestøtte**
med høyde, helning og regulering
frem-og bakover.



859 Nettbrettholder
med høyde-, hellings- og dybde
reguleringsknapper.





App størrelse og vekt

A: base maks bredde

B: maks lengde

C: fotstøtte til bordhøyde

D *:maks bredde med bord

E: fotstøtte til knestøtte høyde

F: fotstøtte til bekkenstøttehøyde

G: fotstøtte til bryststøttehøyde

L: minimum omkrets av støttene

M: brukerhøyde

Total vekt

Maksimal belastning

størrelse 1

66 cm

fra 76 til 88 cm

fra 49 til 77 cm

64 cm

fra 14 til 24 cm

fra 41 til 55 cm

fra 53 til 72 cm

60 cm

fra 75 til 100 cm

24,6 kg

35 kg

størrelse 2

70 cm

fra 78 til 90 cm

fra 59 til 87 cm

65 cm

fra 14 til 36 cm

fra 52 til 68 cm

fra 67 til 94 cm

65 cm

fra 90 til 125 cm

26 kg

45 kg

størrelse 3

73 cm

fra 80 til 92 cm

fra 69 til 100 cm

70 cm

fra 14 til 42 cm

fra 62 til 86 cm



fra 82 til 110 cm

70 cm

fra 120 til 150 cm

28,5 kg

55 kg

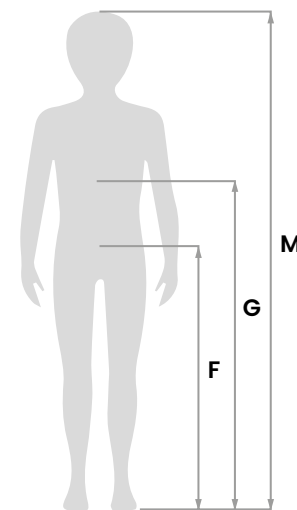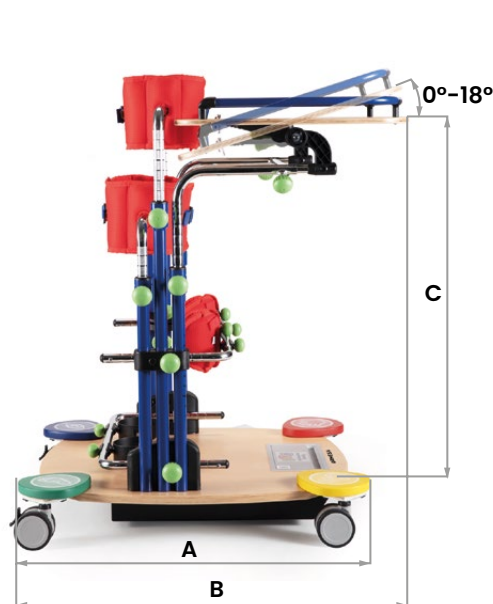

Forsikre deg om at tiltak F og G angitt i figuren ikke overstiger det foreslåtte området som er angitt for støttene.

*i størrelse 1 er den største belastningen gitt av tabellen. I størrelsene 2 og 3 er den gitt av knottene.








Simone og historien hans venter på deg på vår nettside Ronda og Ormesa, sammen med andre hovedpersoner i vår fantastisk globale fellesskap.



Ronda AS - Randabergveien 308 - 4073 RANDABERG
Tlf.: 51588780 Mob. 91572071 Mail: post@ronda.no - www.ronda.no

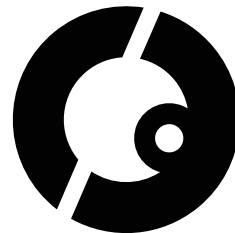

**En spesiell takk til familiene som deltok med
entusiasme i prosjektet vårt. Det er takket være våre
kunder og historiene deres at vi finner energi og stimuli
som bidrar til å utvikle videre, dag for dag.**

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via A. Da Sangallo, 1 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com